




**Nakon skeniranja** čipova spojite uređaj putem USB priključka na vaše računalo gdje je instaliran program kompatibilan sa čitačem. Program se automatski otvara i prikazuje očitane čipove. Ukoliko se ne otvori automatski, sami pokrenite program, odspojite uređaj sa računala i ponovno ga spojite.

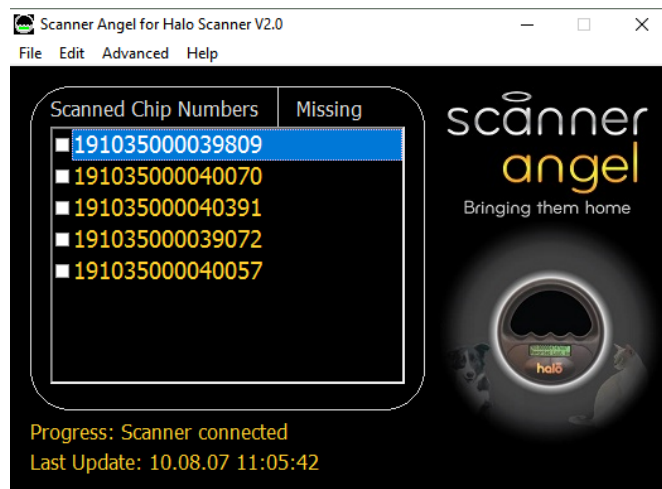

**Za spremanje** zapisa očitanih čipova pritisnete **File -> Save**

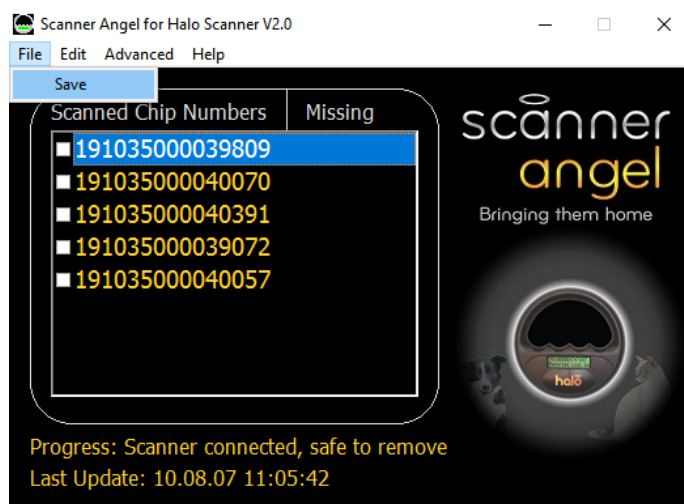


**Otvara se** dialoški prozor za spremanje rezultata očitavanja u obliku txt datoteke.

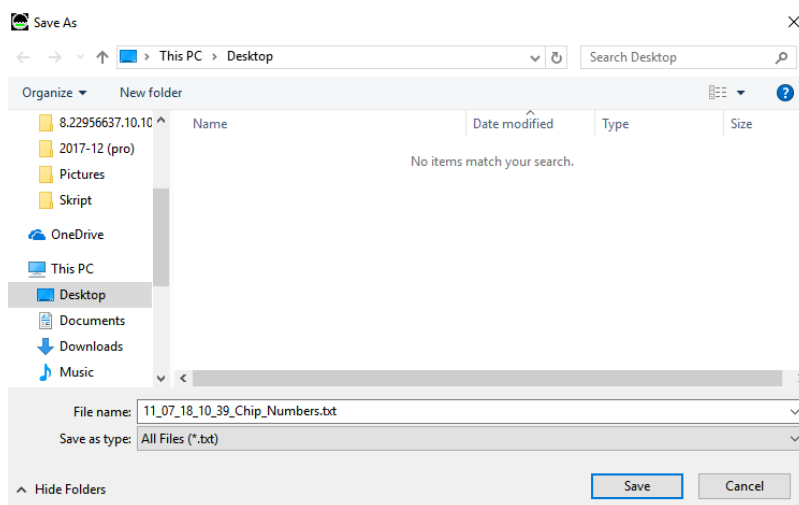

**Nakon** što ste spremili datoteku, možete odspojiti uređaj.


**Napomena:** indikatori da je uređaj spojen su zeleno obojani logo programa:

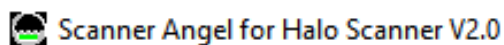


i poruka na dnu:

**Progress: Scanner connected, safe to remove**


**Ukoliko ponovno** spojite uređaj sa računalom a niste nakon zadnjeg spajanja imali očitavanja, program neće prikazivati prije očitane rezultate. Prije očitane rezultate možete ponovno spremi na isti način kao i prije (**File -> Save**) i svi rezultati će biti u txt datoteci.

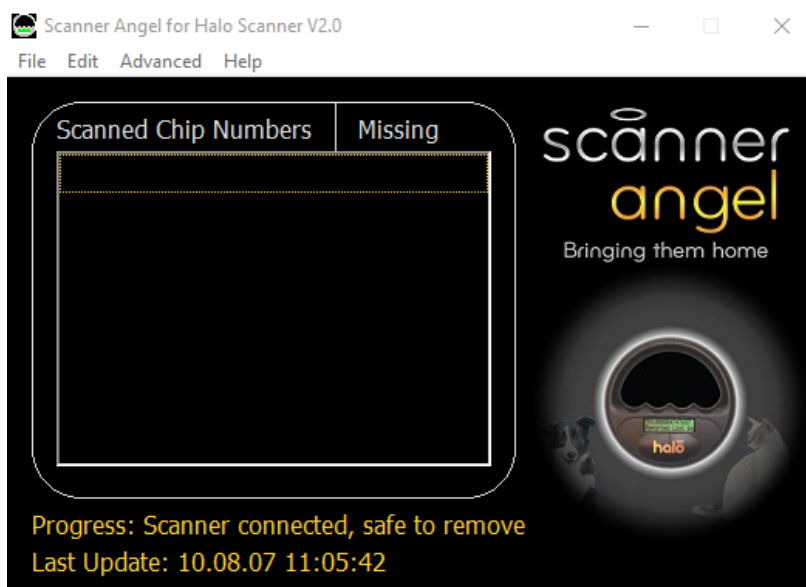


**Ukoliko ponovno** spojite uređaj sa računalom nakon što ste obavili nova očitavanja program će prikazivati samo nove prije očitane rezultate.

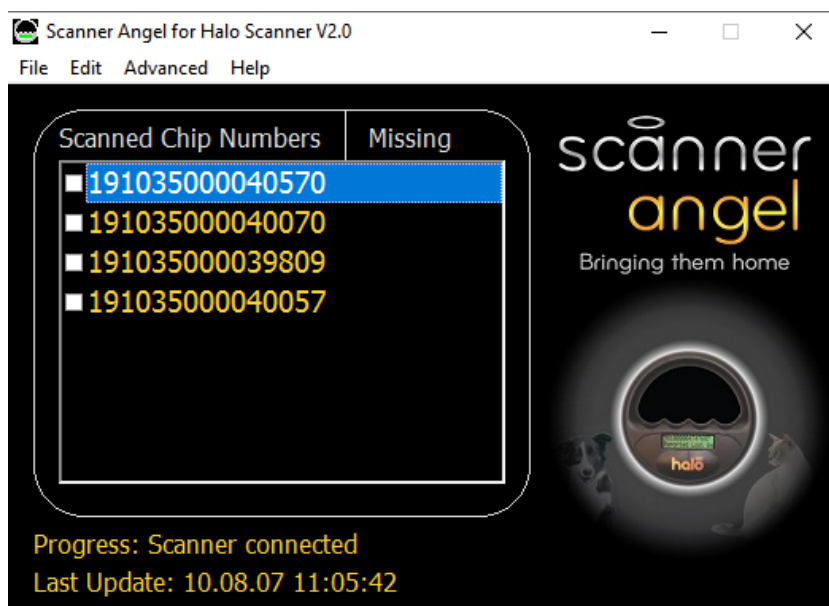


**Ali** nakon što spremite podatke u obliku txt datoteke (**File -> Save**), u datoteci se nalaze svi očitani brojevi čipova, datum i vrijeme kada je uređaj zadnji puta bio spojen na računalo za prikaz očitanih čipova.

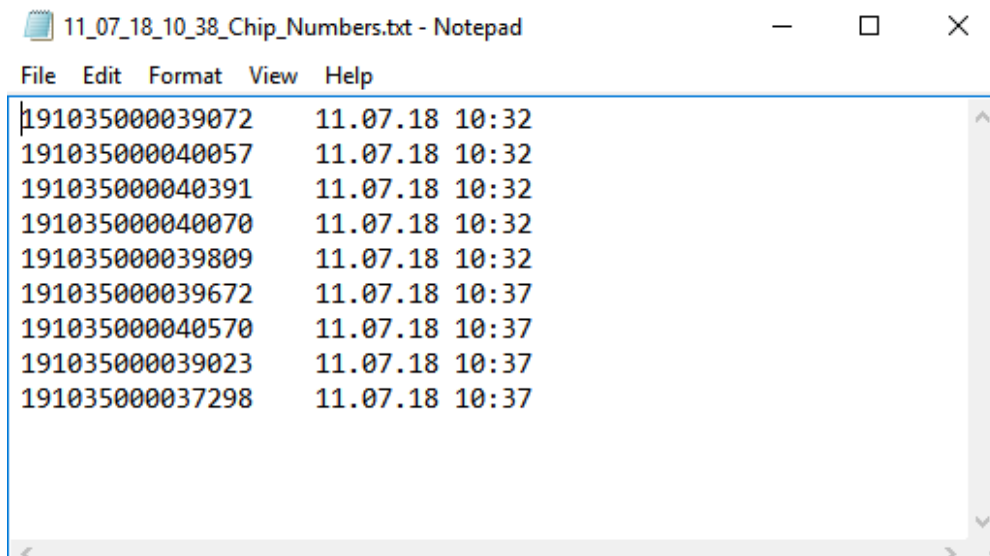


**Nakon** što ste povukli sve podatke iz uređaja možete pobrisati (resetirati) podatke tj vratiti uređaj na početne postavke (resetirati). Pritisnite Advanced -> reset Scanner.

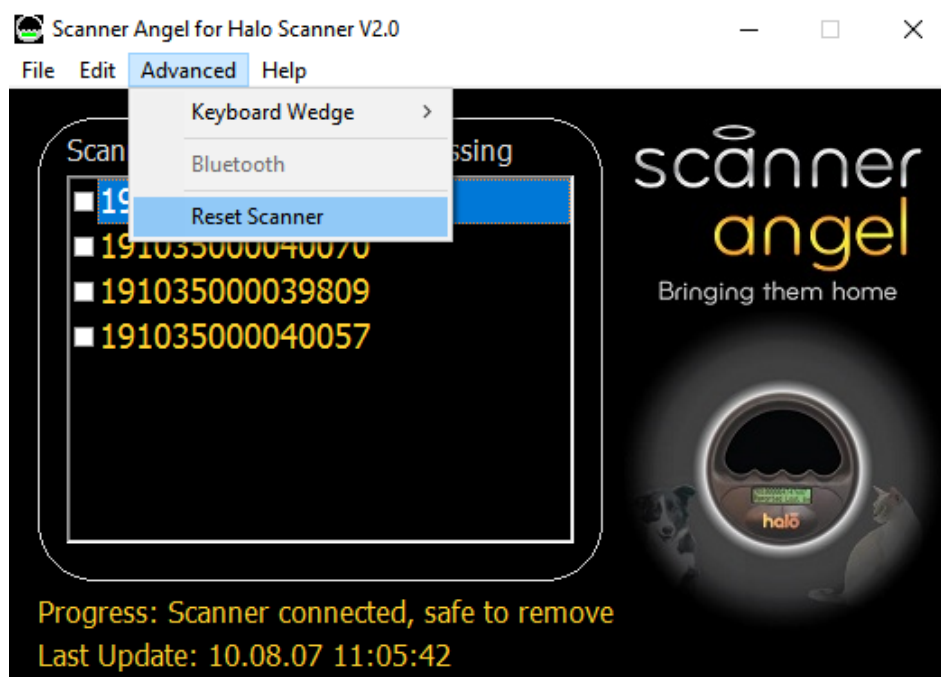


**Otvara se** dialoški prozor sa upitom, jeste li sigurni. Kliknite Da/Ok

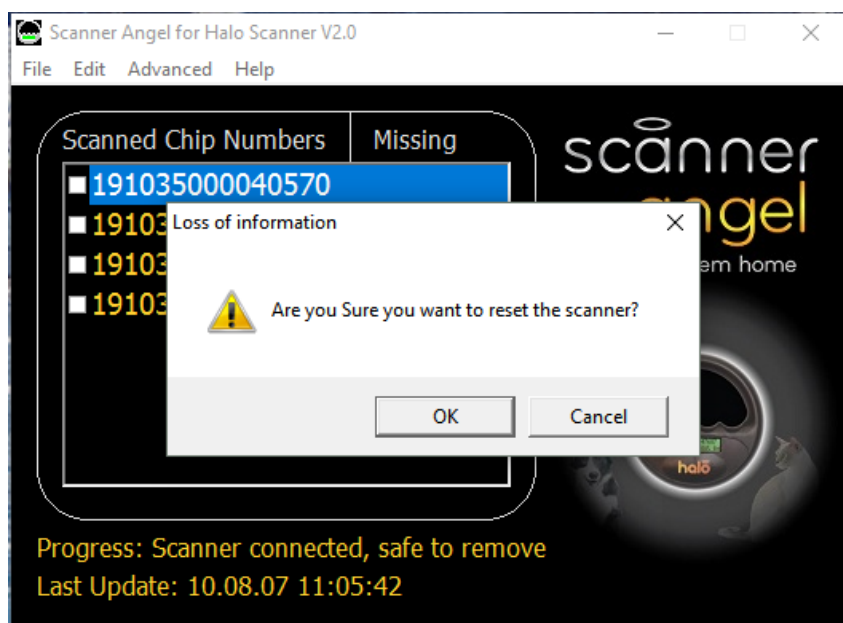


**Otvara se** novi **iznimno bitan dialoški prozor** sa porukom "Molimo da odspojite uređaj, pritisnite OK, pričekajte 5 – 10 sekundi te ponovno priključite uređaj na računalo." Kada odspojite uređaj i pritisnete OK, nestat će prozor programa.

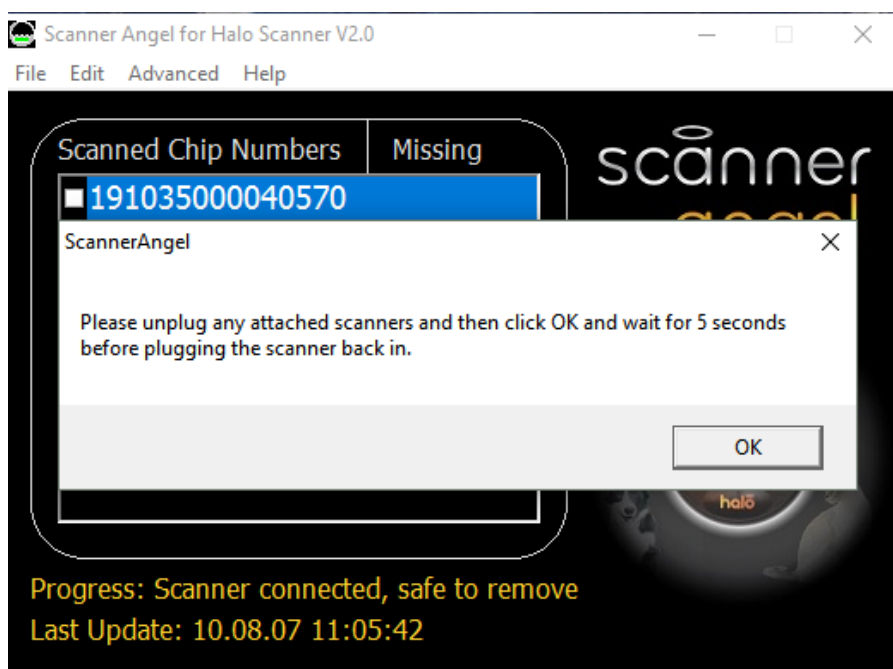

**Kada** je uređaj ponovno spojen, opet se otvara program na čijem dnu prozora je vidljiv napredak brisanja podataka.

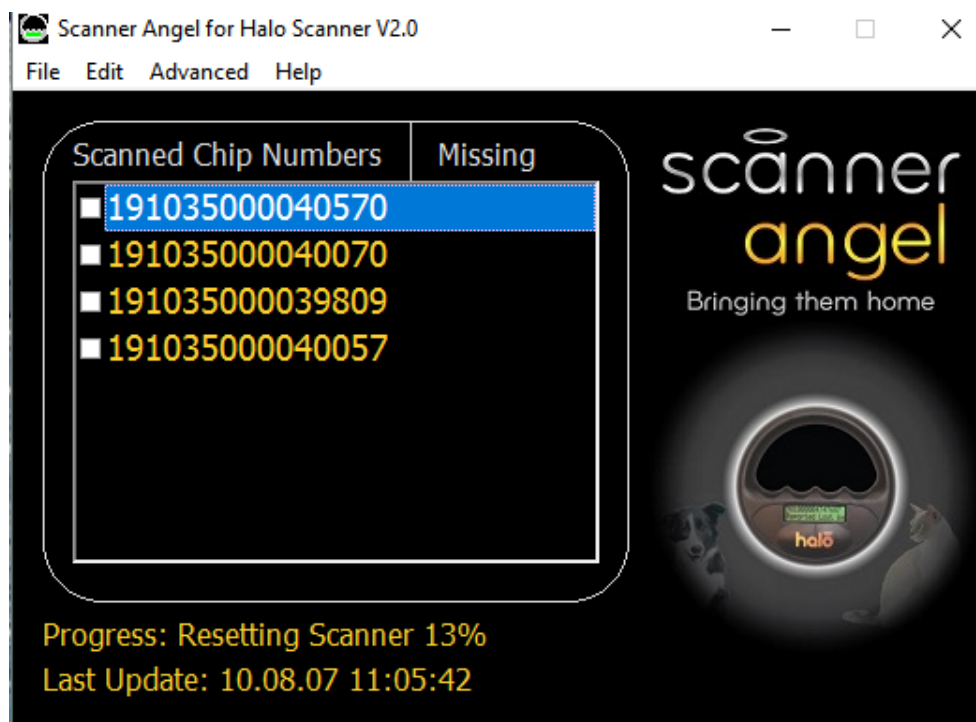

**Nakon** što poruka na dnu *Progress: Resetting Scanner*, dosegne 100%, pojaviti će se poruka *Progress: Scanner connected, safe to remove*.

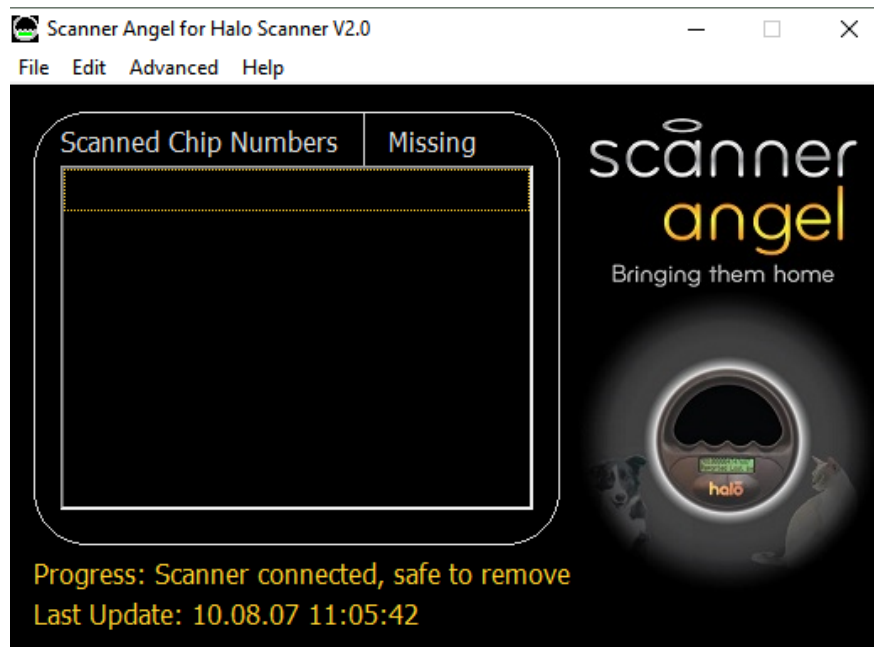

**Sada uređaj ne sadrži prije očitane podatke i spreman je za novo korištenje.  
Slobodno odpojite uređaj sa računala.**